


Refrigerador farmacéutico



Disponible en modelos con
puerta de vidrio y puerta sólida

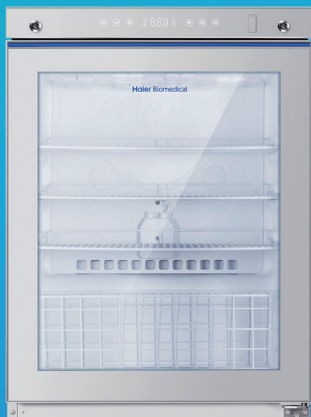

HYC-130GD/FD



Ahorro de energía



Funcionamiento silencioso



Bisagra de puerta reversible

Diseño innovador

- Diseñado específicamente para uso médico y de laboratorio
- Alto rendimiento con bajo nivel de ruido
- Ecológico y de bajo consumo energético
- Sin condensación incluso a una temperatura ambiente de 32 °C y una humedad relativa del 80 %
- Monitoreo y adquisición de datos prácticos

Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd.

No.280 Fengyuan Road, High-tech Zone,
Qingdao, 266111, Shandong, P.R. China
E-mail: inquiry@haierbiomedical.com
Website: www.haiermedical.com
Aug. 2026



Haier Biomedical



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International

Características del producto



Refrigerante de hidrocarburo ecológico (R600a) y aislamiento de poliuretano sin CFC para reducir el potencial de calentamiento global.



Compresor herméticamente sellado y circulación de aire forzada con descongelación automática para garantizar un alto rendimiento de refrigeración.



Estantes de rejilla ajustables con revestimiento de plástico para mejorar la circulación del aire y ofrecer un almacenamiento flexible.



Puerto de acceso para sonda de 25 mm, compatible con equipos de monitoreo proporcionados por el usuario.



USB opcional y RS485 opcional para facilitar la adquisición de datos.



Funcionamiento silencioso con un nivel de ruido de solo 37 dB(A).



HYC-130GD: Puerta de vidrio de triple capa con marco calefactado para evitar la condensación incluso a una temperatura ambiente de 32 °C y una humedad relativa del 80 %; juntas magnéticas para garantizar un cierre hermético.

HYC-130FD: Puerta sólida diseñada para evitar la condensación incluso a una temperatura ambiente de 32 °C y una humedad relativa del 80 %; juntas magnéticas para garantizar un cierre hermético.



Múltiples funciones de alarma para un monitoreo más seguro, con alertas sonoras y visuales y función de silencio; contactos de alarma remota incluidos de serie en la parte posterior de la unidad.



Fácil consulta de las temperaturas mínima y máxima de las últimas 24 horas.




Controlador por microprocesador y pantalla fácil de limpiar con una resolución de 0,1 °C para un control preciso.



Iluminación LED interior de bajo consumo energético.

Detalles del producto

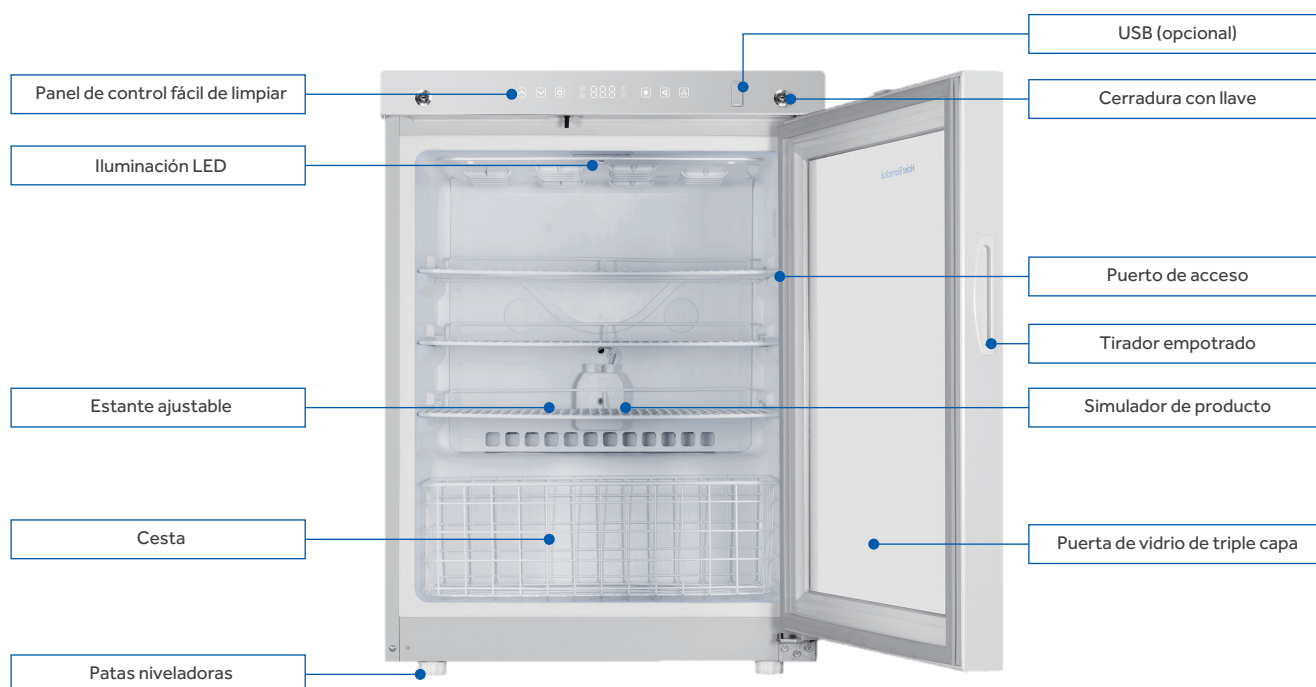

Especificaciones



Modelo			HYC-130GD	HYC-130FD
Datos técnicos	Tipo de gabinete		Bajo mostrador, puerta de vidrio	Bajo mostrador, puerta sólida
	Clase climática		N, 16-32 °C	N, 16-32 °C
	Tipo de refrigeración		Refrigeración por aire forzado	Refrigeración por aire forzado
	Modo de descongelación		Automático	Automático
	Refrigerante		R600a, 30 g	R600a, 30 g
	GWP (Potencial de calentamiento global)		20	20
	Nivel de ruido (dB(A))		40	40
Rendimiento	Rango de temperatura (°C)		2-8 °C	2-8 °C
Control	¿El ventilador se detiene automáticamente al abrir la puerta?		Sí	Sí
	Controlador		Microprocesador	Microprocesador
	Pantalla		LED	LED
Datos eléctricos	Alimentación eléctrica (V/Hz)		115/60	115/60
Características de rendimiento	Sensor de temperatura		NTC	NTC
	Consumo de energía (kWh/24 h)		0,85	0,45
	Capacidad (L/pies³)		130 / 4,6	130 / 4,6
Dimensiones	Peso neto/bruto (aprox.)	kg	48/52	40/44
		lbs	105.8/114.6	88.4/97.24
	Dimensiones interiores (An. × Pr. × Al.)	mm	515*455*715	515*455*715
		in	20.1*17.7*28.0	20.1*17.7*28.0
	Dimensiones exteriores (An. × Pr. × Al.)	mm	595*670*840	595*670*840
		in	23.4*26.4*33.1	23.4*26.4*33.1
	Dimensiones del embalaje (An. × Pr. × Al.)	mm	670*730*890	670*730*890
		in	26.4*28.7*35.0	26.4*28.7*35.0
	Carga del contenedor (20'/40'/40'H)		48/102/102	48/102/102
Alarmas	Temperatura alta/baja		Sí	Sí
	Temperatura ambiente alta		Sí	Sí
	Puerta abierta		Sí	Sí
	Fallo de alimentación		Sí	Sí
	Batería baja		Sí	Sí
	Error del sensor		Sí	Sí
	Fallo de comunicación		Sí	Sí
	Sobrecalentamiento del condensador		No	No
	Alarma remota		Sí	Sí
	Alarma sonora y visual		Sí	Sí

Specifications

	Modelo	HYC-130GD	HYC-130FD
Accesorios	Ruedas	2	2
	Patas	2	2
	Puerto de acceso	1	1
	Estantes/Cesta	3/1	3/1
	Impresora	N/D	N/D
	Registrador gráfico	N/D	N/D
	Interfaz USB	Opcional	Opcional
	RS485	Opcional	Opcional
	Estantes de acero revestido	An. × Pr. × Al.: 505,5 × 405 × 39,5 mm Cantidad estándar: 3	An. × Pr. × Al.: 505,5 × 405 × 39,5 mm Cantidad estándar: 3
	Estantes de acero inoxidable	An. × Pr. × Al.: 505,5 × 405 × 39,5 mm Cantidad máxima opcional: 3	An. × Pr. × Al.: 505,5 × 405 × 39,5 mm Cantidad máxima opcional: 3
	Cajón de acero inoxidable ^{①③④}	Cajón grande (An. × Pr. × Al.): 498 × 438 × 62 mm Cajón pequeño (An. × Pr. × Al.): 387 × 300 × 62 mm Cantidad máxima opcional: 4; se recomienda el reemplazo completo	Cajón grande (An. × Pr. × Al.): 498 × 438 × 62 mm Cajón pequeño (An. × Pr. × Al.): 387 × 300 × 62 mm Cantidad máxima opcional: 4; se recomienda el reemplazo completo
	Cajón de ABS ^②	/	/
	Cesta	An. × Pr. × Al.: 500 × 278 × 167 mm Cantidad estándar: 1	An. × Pr. × Al.: 500 × 278 × 167 mm Cantidad estándar: 1
Material	Batería de respaldo (¿cuántas horas dura la batería?)	Sí, 24 h	Sí, 24 h
	Material exterior (mm)	Acero pintado	Acero pintado
	Material de aislamiento (mm)	Poliestireno	Poliestireno
	Espesor de la puerta	50	50
	Espesor del gabinete	45	45
Otros	Material de los estantes	Alambre de acero revestido de plástico	Alambre de acero revestido de plástico
	Certificación	UL, ENERGY STAR	UL, ENERGY STAR

①② La modificación implica el ajuste del gabinete y la instalación de las guías deslizantes.
El reemplazo individual resulta costoso; se recomienda el reemplazo completo.

La instalación in situ por parte del usuario final no es viable.

③ Los cajones de acero inoxidable del HYC-341GD solo están disponibles si el revestimiento interior se modifica a acero inoxidable.

④ Los cajones de acero inoxidable del HYC-461GD solo están disponibles con un revestimiento interior modificado de acero inoxidable.

*Haier Biomedical se reserva el derecho de modificar los productos y las especificaciones sin previo aviso.

Estantes y cajones



Estantes de
acero revestido



Estantes de
acero inoxidable



Cajón de acero inoxidable



Cajón de ABS



Cesta